

Stappenplan: Aanmaken en verwerken van een Dual Gaze-project in gazeMapper

Deze handleiding beschrijft hoe je stap voor stap een dual gaze-project opzet en verwerkt in gazeMapper, inclusief het importeren van data, uitvoeren van analyses en exporteren van resultaten.

1. Project aanmaken

- Open **gazeMapper**
- Selecteer in het startmenu de optie **“Make new dual gaze project”**
- Kies een lege map waarin het nieuwe project aangemaakt moet worden. De dual gaze-template wordt automatisch geladen.

2. Nieuwe sessie aanmaken


- Ga in het linker zijmenu naar het tabblad **“Session”**
- Klik op **“New session”**
- Geef de sessie een herkenbare naam en klik op **“Create session”**

3. Eye tracker recordings importeren

- Klik op **“Import eye tracker recordings”**
- Navigeer naar de mappen waarin de opnames van de Tobii Pro Glasses 3 staan
- Selecteer als type **“Tobii Pro Glasses 3”**, of een ander type als je een andere eye tracker gebruikt
- Sleep de gevonden opnames naar de juiste opname-namen in de sessie, bijvoorbeeld **“lead”** en **“follow”**
- De bijbehorende video's worden automatisch geïmporteerd en gekoppeld aan de sessie

4. Automatische codering uitvoeren

- Klik op de sessie met de rechtermuisknop
- Selecteer **“Run auto codes”**

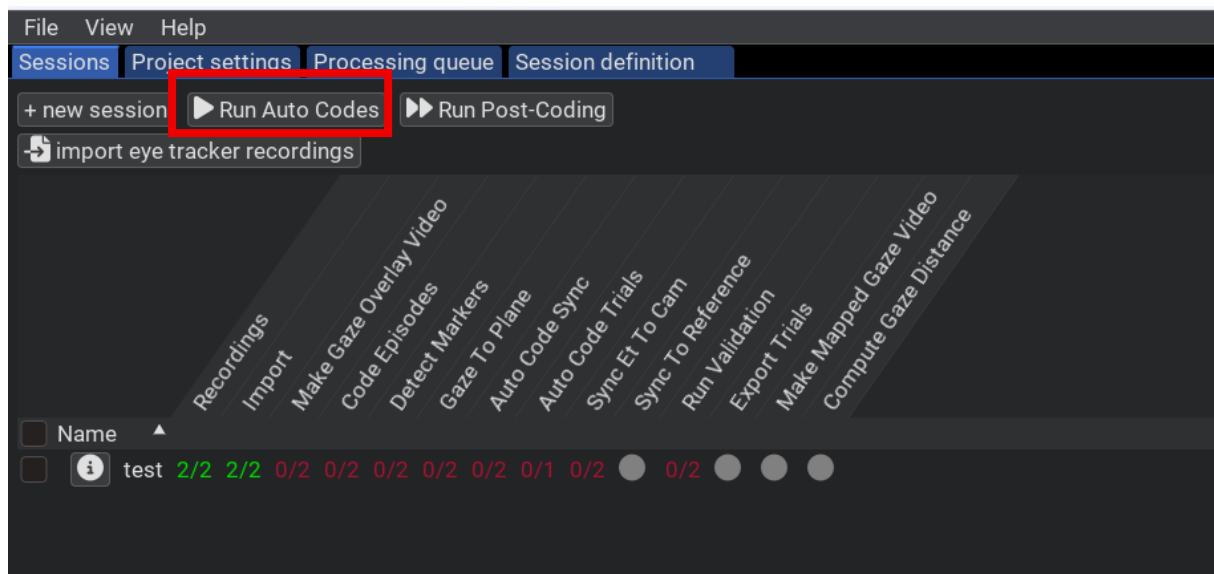


Deze pipeline voert de volgende stappen automatisch uit:

- Detectie van markers
- Automatische codering van synchronisatiepunten
- Automatische detectie van taaksegmenten

Wacht tot elk proces is afgerond.


- Je ziet in de terminal per stap een melding wanneer het proces is voltooid. Ook zie je in de GUI als alle stappen voltooid zijn als er een groen vinkje of een 1/1 2/2 staat.

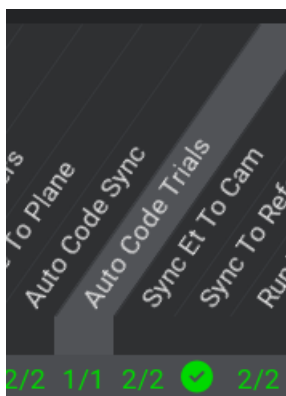


- Ga pas verder naar de volgende stap als alle stappen in deze pipeline correct zijn doorlopen.

5. Handmatige episodecodering

- Klik met de rechtermuisknop op de sessie
- Kies “Code episodes”

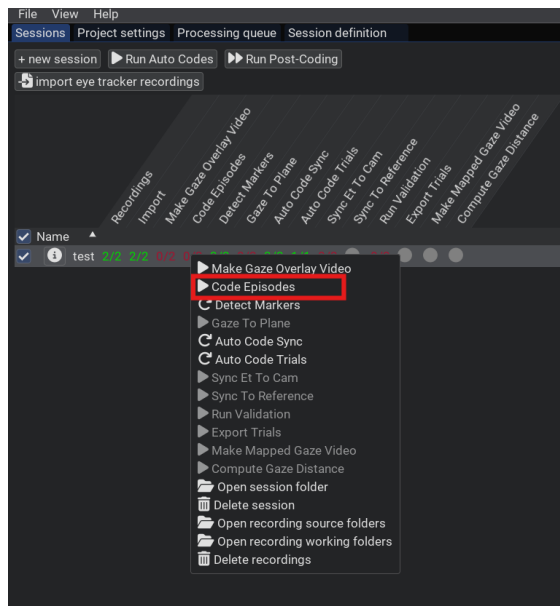

- Er opent nu een coderingsvenster waarin je de **validatie- en synchronisatie-episodes** handmatig codeert aan de hand van het videobeeld

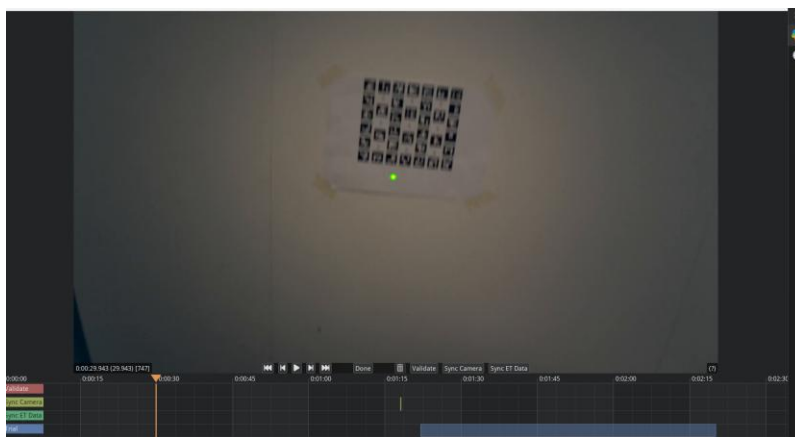

Validatie-interval coderen:

Nadat de opnames zijn geïmporteerd, geef je in de coderings-GUI aan waar het validatie-interval zich bevindt in elke opname. Een validatie-interval is één aaneengesloten periode waarin een deelnemer kijkt naar de validatieposter, vanaf het moment dat de blik op het eerste fixatiepunt begint tot het moment dat het laatste fixatiepunt verlaten wordt.

Voer per opname de volgende stappen uit:

- Zoek het begin van het validatie-interval met de afspreekknoppen of de pijltoetsen.
- Pauzeer de video op het exacte frame waarop de eerste fixatie op de poster begint.
- Druk op **V** om dit moment te markeren als **begin** van het interval.
- Zoek daarna het exacte frame waarop de deelnemer het laatste fixatiepunt loslaat.
- Druk opnieuw op **V** om het **einde** van het interval te markeren.


Herhaal dit voor eventuele extra validatie-intervallen. Zorg ervoor dat elke validatie afzonderlijk gecodeerd wordt (bijvoorbeeld bij validatie op twee afstanden), en dat je geen losse segmenten per target maakt—dit wordt automatisch verwerkt.

Gebruik de GUI-functionaliteiten zoals frame-vooruit (J), frame-terug (K), pauzeren (Spatiebalk) en zoeken met de tijdlijn.

Als je klaar bent, druk je op **Enter** om de intervaldata op te slaan. Deze worden automatisch gebruikt in de verdere verwerking van de data.

6. Eye tracker synchroniseren met scene camera (Sync ET to Cam)

- Klik met de **rechtermuisknop** op de sessie
- Kies **“Sync ET to Cam”** uit het menu
- Er wordt nu een venster geopend met twee tijdreeksen:
 - De bovenste is de **gaze signaaldata van de eye tracker**
 - De onderste is de **camera-annotatie (bijv. markerherkenning)**

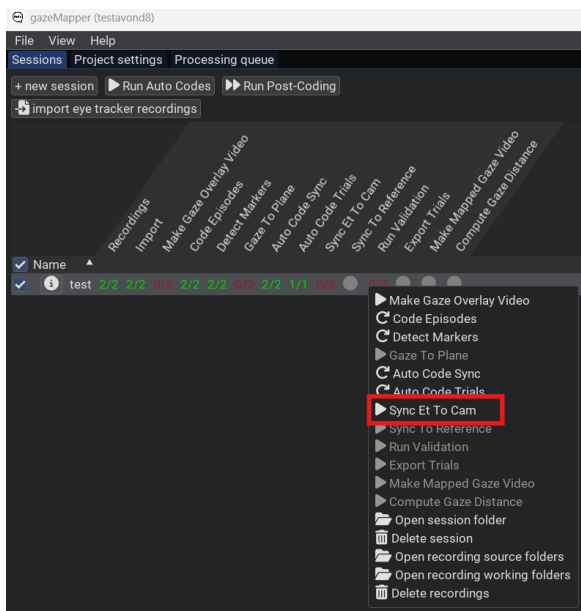


Handmatige synchronisatie:

- Versleep de **groene stip** in het midden van één van de grafieken horizontaal om de tijdlijnen uit te lijnen
 - De horizontale verplaatsing bepaalt de **offset** (tijdverschuiving) tussen het gaze-signaal en het videobeeld
 - Deze verschuiving wordt rechtsonder in het bovenste plot weergegeven als het toegepaste tijdsverschil in seconden
- Eventuele verticale verschuivingen zijn alleen visueel ter ondersteuning en worden **niet opgeslagen**
- Bekijk het effect van de verschuiving en zorg dat de twee signalen **visueel goed uitgelijnd** zijn
- Als de lijnen goed gesynchroniseerd zijn, klik je bovenaan het venster op **“Done”**

6. Post-coding pipeline uitvoeren

- Klik opnieuw met de rechtermuisknop op de sessie
- Kies **“Run post coding”**

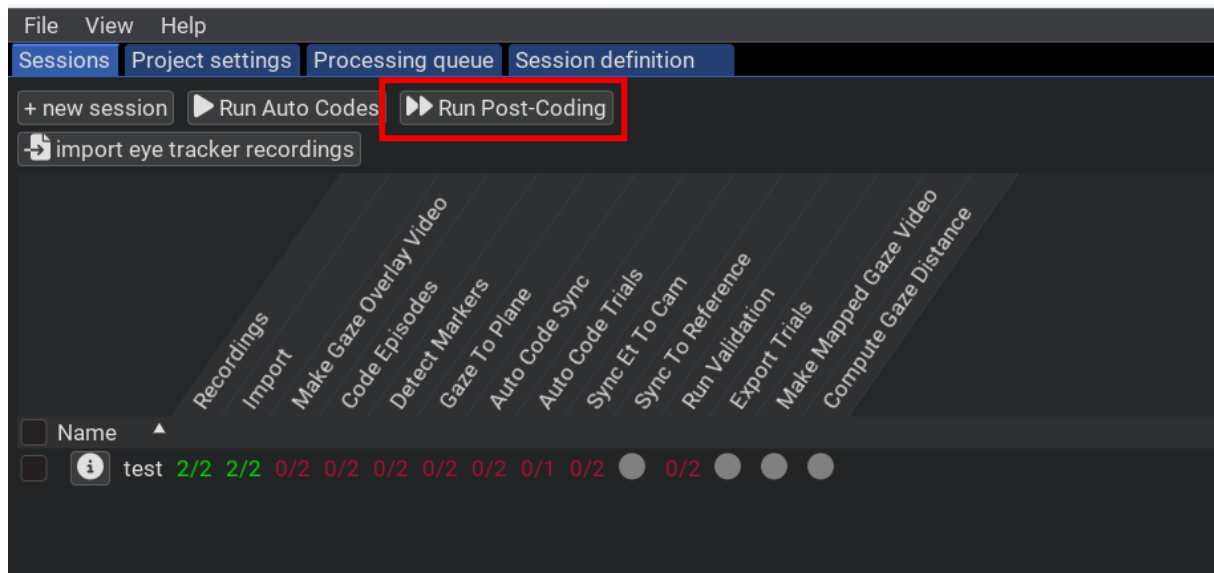

- Deze stap voert automatisch de volgende processen uit:
 - Synchronisatie met referentie
 - Gaze mapping
 - Validatie
 - Afstandsberekening
 - Genereren van outputvideo's

7. Exporteren van de resultaten

- Klik met de rechtermuisknop op de sessie
- Kies **“Export trials”**
- De gaze-bestanden, validatieresultaten en gegenereerde video's worden geëxporteerd naar de ingestelde map